

臨床検査システム

メディシスリンク

MEDISYS LINK



東京貿易メディシス

ラボラトリー ソリューション

メディシスリンク

多面的な機能と軽快な操作性を持つ

“メディシスリンク”は

検査業務を迅速かつ正確にサポートします。



分析装置オンライン

生化学分析装置、血球計数器、尿分析装置など多彩な機器とオンライン連携、検査データを一元管理します。

他システム連携

電子カルテ/オーダーリングシステム、外注検査センター連携など他の部門システムと連携できます。途切れのない情報交換で検査業務を効率的にサポートします。

検査結果閲覧機能

院内ネットワークに接続されたパソコンで検査進捗情報、検査結果情報を閲覧可能です。

メディシスリンク連携イメージ



基本業務機能

業務ごとに画面を分別することで1画面での情報煩雑化を避けています。

また、キー情報で各業務画面を連携(ダブルクリックで遷移)することで

画面が切り替わっても情報は引き継がれますので途切れなく業務に取り組むことができます。

視覚的に情報を得られるよう、配色・マークなどを効率的にレイアウトしています。

配色・マーク等はオペレーターで設定可能です。



【依頼・時系列画面】

【ワークシート画面】

データ集計・統計

患者属性、検査結果などデータベースに集約します。

日次集計、検査項目条件別抽出などデータの2次利用が可能です。

データ検索機能も充実しています。



報告書

施設様に合わせて報告書を作成することが可能です。

○○診療所		○○診療所
-------	--	-------

〇〇病院		検査技師名
------	--	-------

〇〇綜合病院

【報告書例】

マスター

マスターは各種設定・登録が可能です。項目名やコメントの登録等を行うことができます。

10	B-1 (血清)
----	----------

【項目コメントマスター】


[illegible]

【容器・材料マスター】

第 7 页 共 7 页


【精度管理マスター】

院内フローイメージ

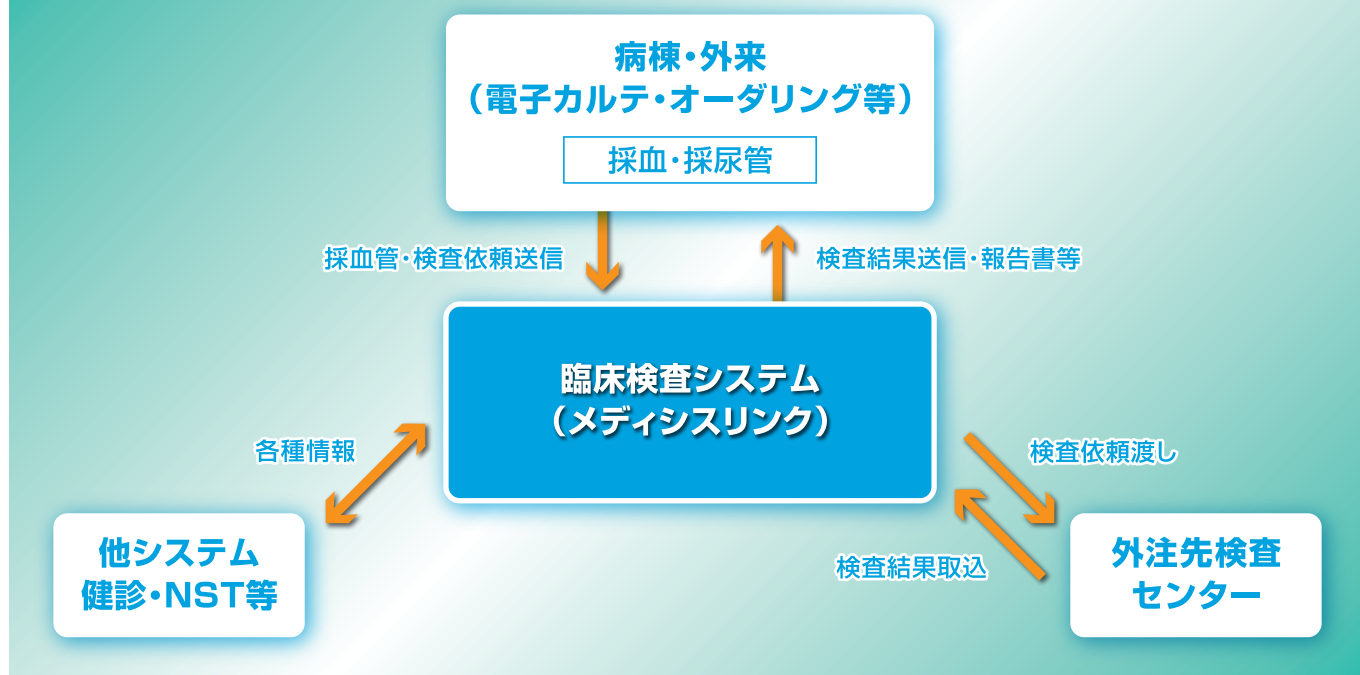

メディシスリンクでは、診療側からの検査依頼を受け取り、分析装置、外注検査センターや他システムに測定依頼を行います。測定結果はメディシスリンクに集約された後、診療側へ返します。

検査室フローイメージ

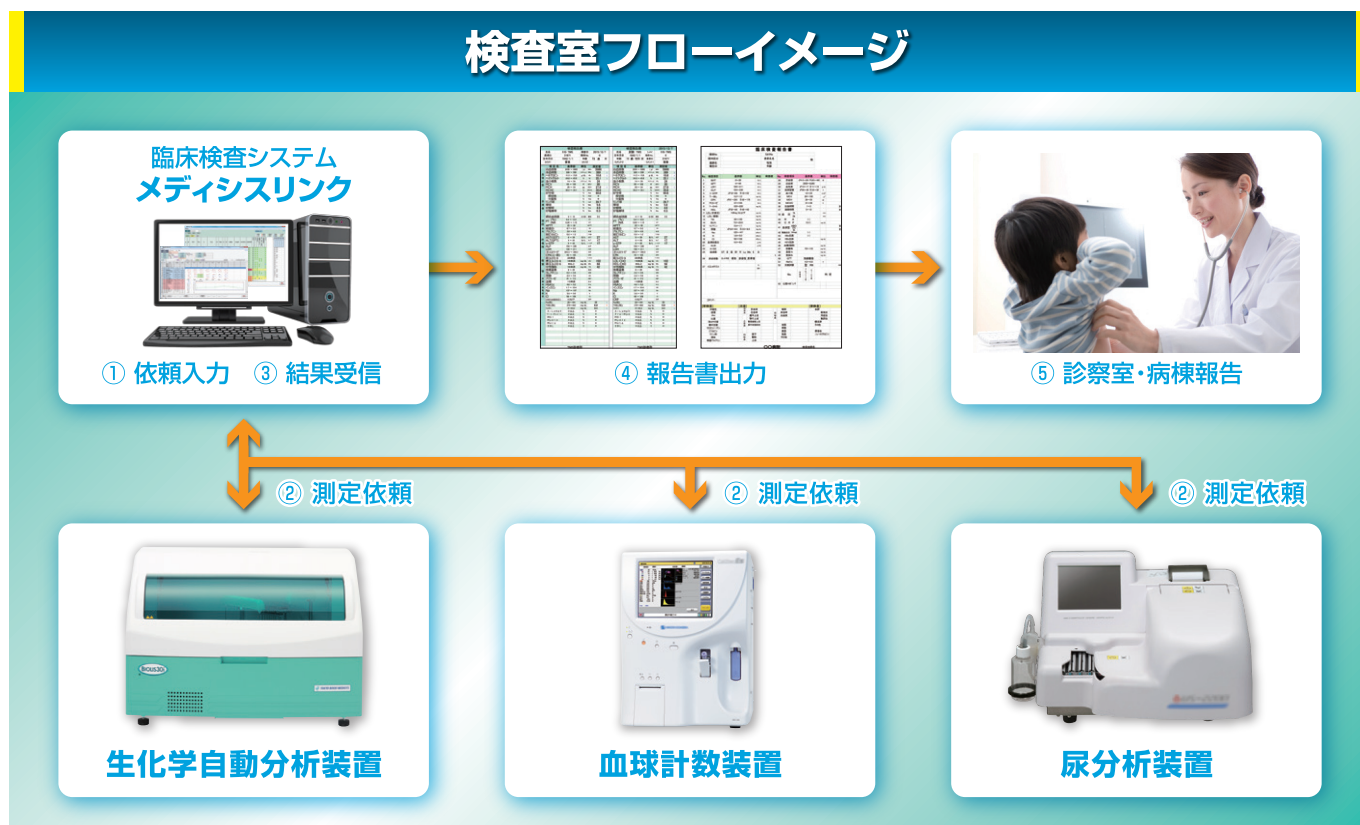

検査室内の各機器への測定依頼はメディシスリンクで行います(※各機器の仕様により異なります)。
各機器で測定されたデータの集約・保管・検索が可能です。

システム標準機能

依頼登録	表示機能	入力／編集	入力補助
属性情報記録	進捗一覧	依頼／結果編集	変換入力
セット／親子登録	依頼／結果情報	再検管理	項目別コメント
検体ラベル発行	時系列結果	ワークシート	項目間計算式
	精度管理		
検索／集計	帳票管理	マスター管理	
依頼検索	検査報告書	検査項目	
日／月／年次集計	時系列報告書	親子／セット項目	
データ検索	検査台帳	報告書レイアウト／出力項目情報	

※お客さまのご要望に応じてカスタマイズも可能です。

オプション機能例

測定器オンライン	電子カルテ連携	閲覧システム	データ出力
外注検査連携	健診システム連携	血液像カウンタ	データ取込

仕 様

OS	Windows7以降
データベース	PostgreSQL
データ件数	9999件／日
分析装置	TCP/IP、RS-232C「HL7、ASTM 他通信仕様対応」
他部門連携	TCP/IP、ファイル交換 HL7、MEDIS、CSV 等

※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。



東京貿易メディシス株式会社

本社・R&Dセンター

〒191-0052 東京都日野市東豊田1-14-21
TEL042-587-7777(代表) FAX042-587-7781
<http://www.tb-medisis.co.jp>

海外マーケティング部

国内マーケティング部

東京営業所

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28F
TEL03-6841-8703 FAX03-6841-8704

札幌営業所

〒060-0908 札幌市東区北8条東3-1-1 宮村ビル6F
TEL011-751-6472 FAX011-751-6471

仙台営業所

〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル5F
TEL022-353-7601 FAX022-353-7602

名古屋営業所

〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種ビル3F
TEL052-982-6377 FAX052-982-6577

大阪営業所

〒550-0004 大阪市西区靱本町2-3-2 なにわ筋本町MIDビル10F
TEL06-6110-5061 FAX06-6110-5068

広島営業所

〒739-1733 広島市安佐北区口田南2-15-17
TEL082-847-6222 FAX082-847-6223

福岡営業所

〒813-0034 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル7F
TEL092-623-1689 FAX092-623-1789